

cutape ®

**¡Te lo explico en vídeo!**



Video manual

**[www.cutape.es](http://www.cutape.es)**

*Marca registrada © 2019 todos los derechos reservados.  
Fabricado en España.*

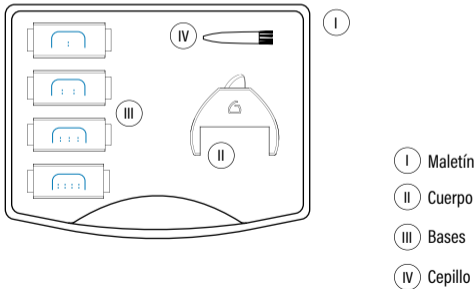
## Tabla de contenido/*Table of contents*

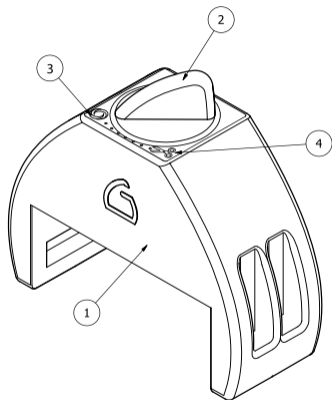
<b>Antes de comenzar</b> .....	5
<i>Before you start</i> .....	15
<b>Instrucciones de Uso</b> .....	8
<i>Operating Instructions</i> .....	18
<b>Precauciones de Seguridad</b> .....	11
<i>Safety Precautions</i> .....	21
<b>Cuidado y Mantenimiento</b> .....	12
<i>Care and Maintenance</i> .....	22
<b>Nota Legal</b> .....	13
<i>Legal Disclaimer</i> .....	23
<b>Reciclado</b> .....	13
<i>Recycling</i> .....	23
<b>Garantía</b> .....	14
<i>Warranty</i> .....	24
<b>Atención al cliente</b> .....	14
<i>Customer Service</i> .....	24



## Antes de comenzar

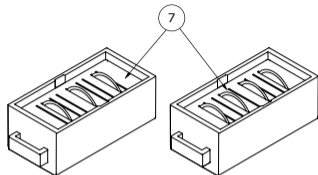
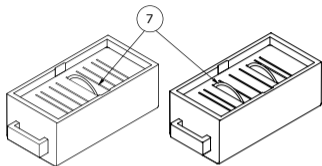
Este producto ha sido diseñado para realizar cortes con rapidez y equitativos, en las diversas opciones de uso del vendaje neuromuscular. Con el objetivo de simplificar el corte, mejorar el tiempo de ejecución y la simetría de los resultados.

El producto se compone:

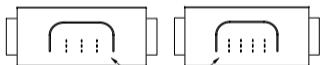
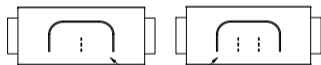




- 1 Cuerpo
- 2 Accionador
- 3 Posición de reposo 
- 4 Posición de corte 



5



6


6

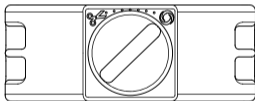
5 Bases

6 Indicadores

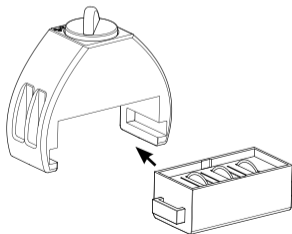
7 Cuchillas

## Instrucciones de Uso

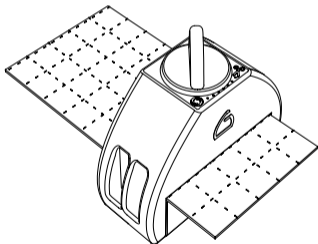
- 1 Tome el cuerpo (1) y posicione el accionador (2) en la posición de reposo  (3)




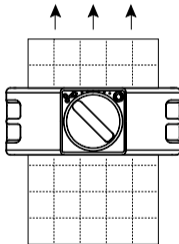
- 2 Escoja una base (5) en función del resultado deseado; tomando como referencia los indicadores (6)  
Inserte la base en el cuerpo a través de las ranuras.




- 3 Introduzca la longitud de vendaje a cortar por la ranura con la cara a color hacia las cuchillas (7)

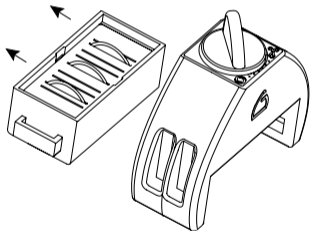



- 4 Gire el accionador suavemente hasta la posición de corte  (4) y estire de la cinta perpendicularmente.

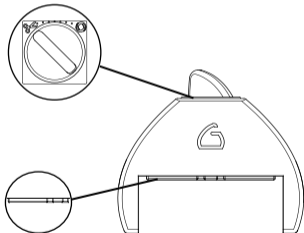




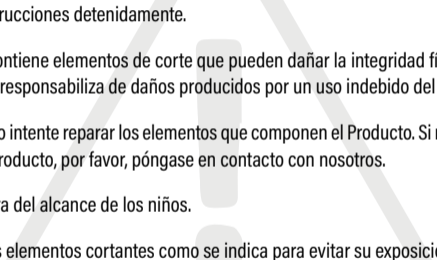
- 5 Posicione de nuevo el accionador en la posición de reposo  y extraiga la base.



- 6 Se recomienda posicionar el accionador en la posición de corte  cuando éste no vaya a ser utilizado y siempre sin una base en el cuerpo.



## Precauciones de Seguridad

- ✓ Lea estas instrucciones detenidamente.
  - ✓ El Producto contiene elementos de corte que pueden dañar la integridad física del usuario. Cutape no se responsabiliza de daños producidos por un uso indebido del Producto.
  - ✓ NO desmonte o intente reparar los elementos que componen el Producto. Si necesita reponer o reparar el producto, por favor, póngase en contacto con nosotros.
  - ✓ Mantener fuera del alcance de los niños.
  - ✓ Almacenar los elementos cortantes como se indica para evitar su exposición.
- 

## Cuidado y Mantenimiento

- ▶ Se recomienda limpiar con frecuencia los restos de vendaje originados del corte tanto en las bases como en la parte interior del cuerpo.

NO utilizar ningún líquido que pueda dañar la integridad de los componentes

- ▶ Situar el accionador en la posición de corte siempre que no haya una base introducida con el fin de evitar tensiones internas prolongadas.
- ▶ Sin desmontar el accionador, lubricar la zona interior del accionador con aceites aptos para polímeros (silicona, teflón, PTFE...), a través de la concavidad entre el accionador y el cuerpo. Aplicar con el spray, esperar a que filtre y eliminar el líquido sobrante.

**NO desmontar los elementos del producto. NO utilizar grasas con base de litio o no aptas para polímeros**

- ▶ Almacene las bases siempre en los huecos orientando las cuchillas hacia la esponja del maletín.
- ▶ Evitar largas exposiciones al sol y otros agentes externos como ambientes salinos y húmedos.

## Nota Legal

La información contenida en este manual se proporciona sólo a título informativo y en cualquier momento puede cambiar sin previo aviso, y no se debe considerar como una obligación para los representantes de Cutape. Estos no asumen ninguna responsabilidad por algún error o imprecisión que pudiera aparecer en este manual.

Los productos y nombres comerciales que aparecen en este manual son marcas registradas y títulos de propiedad intelectual.

## Reciclado

El equipo de Cutape es consciente del cuidado del medio ambiente. Para ello, ofrecemos la posibilidad de enviarnos el producto una vez finalizada su vida útil para su clasificación y reciclaje adecuado. Visite la página Web: **[www.cutape.es/reciclado](http://www.cutape.es/reciclado)** para obtener más información. Si desea reciclar el Producto por su cuenta, le recomendamos consultar la normativa de su región y llevarlo al punto limpio más cercano.

## Garantía

Cutape garantiza al usuario final o al comprador de este producto que el producto no presenta defectos materiales ni de fabricación, de acuerdo con las condiciones expuestas en la garantía legal, durante el periodo de veinticuatro meses desde la fecha de adquisición del producto en su embalaje original. Esta garantía cumple y se rige por la ley de garantía legal de la Unión Europea.

Para consultar la declaración de garantía íntegra, visite [www.cutape.es/terms-compra-garantia/](http://www.cutape.es/terms-compra-garantia/)

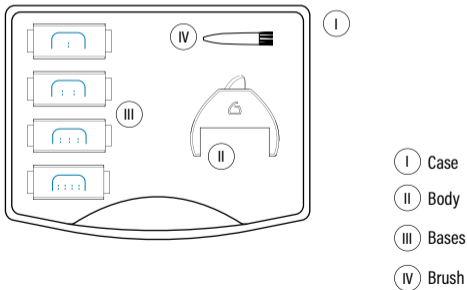
## Atención al cliente

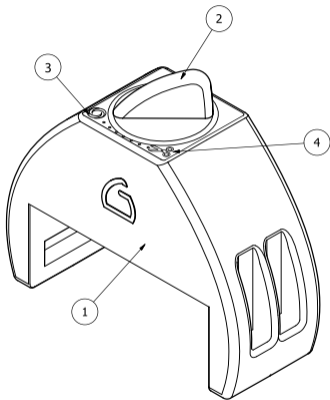
Puede establecer contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través de nuestra web [www.cutape.es/contacto](http://www.cutape.es/contacto) o bien, mediante correo electrónico en [info@cutape.es](mailto:info@cutape.es) o redes sociales.


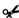
## Before you start

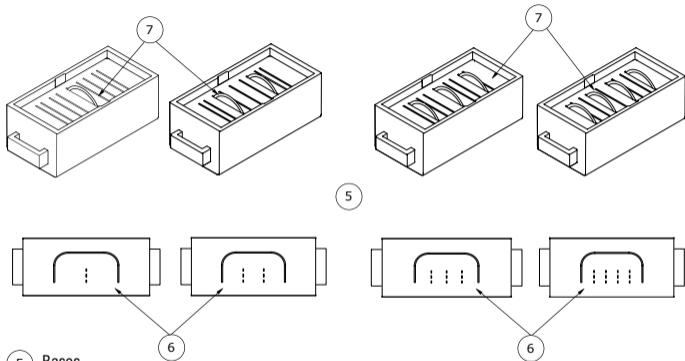
This product has been designed to make quick and equal cuts, in the several options of use of the neuro-muscular tape. With the aim of simplifying the cut, improve the runtime and the symmetry of the results.

The product contains:





- ① Body
- ② Switch
- ③ Resting position 
- ④ Cutting position 




5 Bases

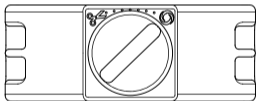
6 Signs

7 Blades



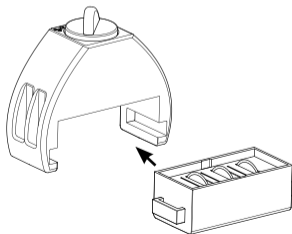
## Operating Instructions

- 1 Get the body (1) and place the switch (2) in the resting position  (3)

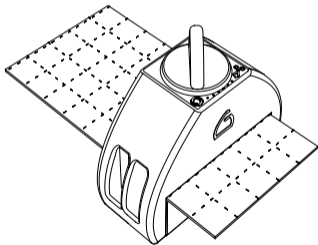


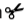
- 2 Choose a base (5) depending on the desired result; taking as reference the signs (6)

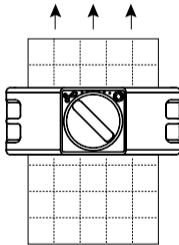
Insert the base in the body through the slits




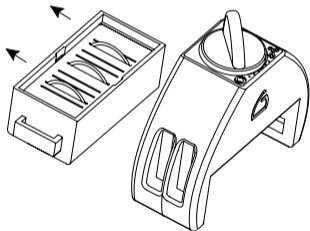
- 3 Enter the tape length to be cut through the groove with the colour side toward the blades (7)




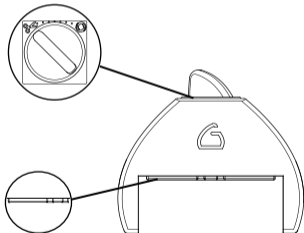
- 4 Turn the switch until the cutting position  (4) and pull the tape perpendicular.



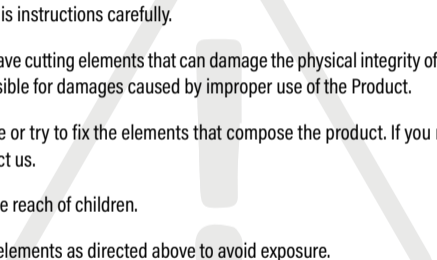
- 5 Turn the switch back on the resting position  and remove the base



- 6 We recommend rotating the switch to cutting position  when not to be used and always without a base in the body.



## Safety Precautions

- 
- ✓ Please, read this instructions carefully.
  - ✓ The product have cutting elements that can damage the physical integrity of the user. Cutape is not responsible for damages caused by improper use of the Product.
  - ✓ Do not remove or try to fix the elements that compose the product. If you need to repair it, please, contact us.
  - ✓ Keep out of the reach of children.
  - ✓ Store cutting elements as directed above to avoid exposure.

---

## Care and Maintenance

- ▶ It is recommended to clean frequently the bandage remnants from the cut on both the bases and the inside of the body.

DO NOT use any liquid that may damage the integrity of the components.

- ▶ Turn the switch to the cutting position whenever there is no inserted base in order to avoid prolonged internal stresses.
- ▶ Without disassembling the switch, lubricate the inner area of the switch with oils suitable for polymers (silicone, teflon, PTFE...), through the concavity between the switch and the body. Apply with the spray, wait for it to filter and remove the remaining liquid.

DO NOT remove the elements of the product. DO NOT use lithium-based grease or not suitable for polymers

- ▶ Always store the bases in the holes of the foam by placing the blades to the bottom of the foam case.
- ▶ Avoid long exposure to the sun and other external agents such as salty and humid environments.

---

## Legal Disclaimer

The information contained in this manual is provided for information only and may change at any time without notice, and should not be considered as an obligation for Cutape responsables. They take no responsibility for any mistakes or inaccuracies that may appear in this manual.

The products and trade names listed in this manual are trademarks and intellectual property titles.

## Recycling

The Cutape team is aware of the care of the environment. For it, we offer the possibility to send the product after the end of its useful life for the appropriate classification and recycling. Visit the website: [\*\*www.cutape.es/reciclado\*\*](http://www.cutape.es/reciclado) for more information. If you prefer to recycle the product by yourself, we recommend you, check the regulations of your region and take into the nearest recycling centre.

## Warranty

Cutape guarantees the end user or the buyer of this product that the product does not present material or manufacturing defects, in accordance with the conditions set out in the warranty, during the period of twenty four months from the date of purchase of the product in its original packaging. This warranty is regulated by the European Union legal warranty law.

For full warranty statement, visit [\*\*\*www.cutape.es/terms-compra-garantia/\*\*\*](http://www.cutape.es/terms-compra-garantia/)

## Customer Service

You can contact our Customer Care Service through our web [\*\*\*www.cutape.es/contacto\*\*\*](http://www.cutape.es/contacto) or, by e-mail to [\*\*\*info@cutape.es\*\*\*](mailto:info@cutape.es) or social networks